




サンガーシーケンス用試薬

QuantumSeq™

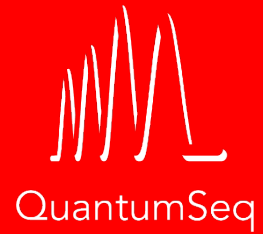


QuantumSeq™の各種試薬は、従来試薬と同等の結果を低コストに提供します。
ワークフロー、プロトコル、キャリブレーション、設定の変更は不要です。

■ 安心のパフォーマンス ■

QuantumDye v3.1


T社
従来試薬 v3.1 使用

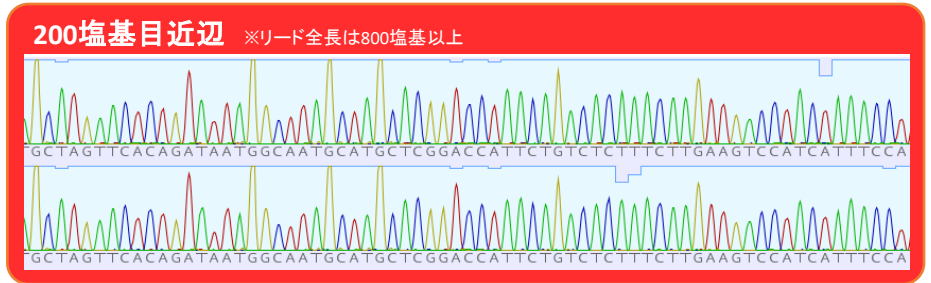

■ GT/Gリッチテンプレート向け ■

QuantumDye dGTP v3.1

T社
従来試薬 dGTP v3.0 使用

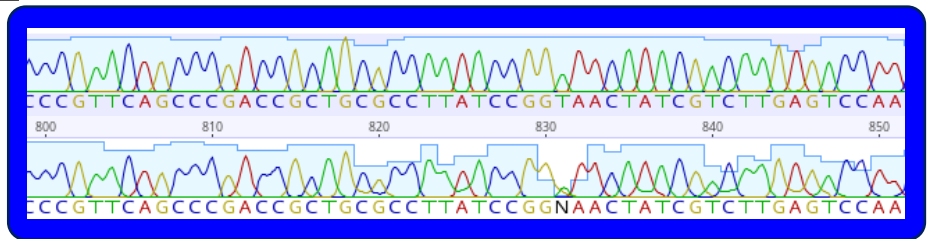

サイクルシーケンシングキット

QuantumDye™ Terminator v1.1/v3.1 Cycle Sequencing kit



製品番号	反応数	v1.1/v3.1	価格(税別)	キット構成			
				QuantumDye Cycle Sequencing Mix	QuantumDye 5x Sequencing Buffer	pGEM® control DNA	M13(-21) Control Primer
QSD1-024	24	v1.1	¥30,000	192 µL	1 mL	10 µL	10 µL
QSD3-024		v3.1	¥23,000				
QSD1-100	100	v1.1	¥119,000	800 µL	2 x 1 mL	10 µL	10 µL
QSD3-100		v3.1	¥92,000				
QSD3-1000	1,000	v3.1	¥873,000	10 x 800 µL	12 mL	250 µL	200 µL
QSD3-5000	5,000	v3.1	¥4,110,000	2 x 20 mL	2 x 28 mL	2 x 250 µL	2 x 200 µL

QuantumDye™ dGTP v3.1 Cycle Sequencing kit



製品番号	反応数	価格(税別)	キット構成			
			QuantumDye Cycle Sequencing Mix	QuantumDye 5x Sequencing Buffer	pGEM® control DNA	M13(-21) Control Primer
QSDG3-024	24	¥30,000	192 µL	1 mL	10 µL	10 µL
QSDG3-100	100	¥119,000	800 µL	2 x 1 mL	10 µL	10 µL

QuantumSeq 製品シリーズ・新製品20%OFFキャンペーン

期間：2024/7/1(月)~31(水) 弊社受注分まで

■ サンガーシーケンス用試薬 ■

※各大容量パッケージあり、お問合せください。

キャピラリーポリマー

QuantumPOP™ 7 Polymer

製品番号	容量	価格(税別)
QSP7-028	28mL	¥70,000



ダイターミネーター希釈液

QuantumDye™ 5x Sequencing Buffer

製品番号	容量	価格(税別)
QS5XB-028	28mL	¥87,000



新製品

■ PCR産物クリーンアップ試薬 ■

QuantumSAP™ PCR Product Cleanup Reagent

QuantumSAPは、ExoSAP-IT™に代わる費用対効果の高い試薬として開発されました。PCR産物に残存する過剰なプライマーやdNTPはシーケンスの妨げとなるため、QuantumSAP試薬には、それらを分解・不活性化させる Exonuclease I (Exo I) と Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP) が含まれています。PCR産物にQuantumSAPを加えてインキュベートするだけの簡単なワークフローで、処理後はそのままロスなくシーケンスに使用可能です。



【プロトコル】

1. PCR産物 5uLに QuantumSAP 2uLを添加
2. 37°Cで10分間インキュベート(酵素反応)
3. 80°Cで5分間インキュベート(不活性化)

リリース記念キャンペーン
20%OFF 期間：2024/7/1(月)~31(水) 弊社受注分まで

製品番号	容量	反応数	通常価格(税別)	キャンペーン価格
QSSP-500	1mL	500	¥50,000	¥40,000
QSSP-2000	1mL×4	2,000	¥140,000	¥112,000

BigDye™、ExoSAP-IT™はApplied BiosystemsおよびThermo Fisher Scientific、pGEM®はPromega Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。本製品は研究目的でのみ使用でき、医療診断や治療に用いることはできません。仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

輸入/販売元

トミーデジタルバイオロジー株式会社

TEL. 03-6240-0843 info_ap@digital-biology.co.jp
https://www.digital-biology.co.jp/

QuantumSeq™

詳細はこちら▶▶

