

超音波ホモジナイザー 特価キャンペーン!!

最高クラスSFXシリーズの中でご好評いただいております
SFX250がキャンペーンの対象品です。



通常
SFX250(¥1,050,000.-)
専用スタンド(¥80,000.-)

合計:¥1,130,000.-
のところ

キャンペーン適用価格で

\\¥880,000.-\\

※記載は税別価格です。
仕様はチラシ背面をご確認ください。



BRANSONの強み

振幅による発振管理をしているため、超音波出力が安定します。
効率的な超音波処理や処理ムラを減らしたい方にお勧めです。



主なアプリケーション

破碎(大腸菌など)・分散(CNFなど)・乳化(化粧品原料など)

キャンペーン期間:2026年3月末まで

 株式会社 **セントラル** 科学貿易 <https://www.cscjp.co.jp/>


BRANSON
Distributor

■東京本社
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル3F
■大阪支店
〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-13-25
■福岡営業所
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-15 事務機ビル
■技術・物流センター
〒272-0146 千葉県市川市広尾2-1-9

TEL:03-5627-8150 FAX:03-5627-8151

TEL:06-6325-3171 FAX:06-6325-5180


TEL:092-482-4000 FAX:092-482-3797

TEL:047-701-6100 FAX:047-701-6116

■ SFX250の仕様

シリーズ名	SFX250
型番	101-063-965
モデル名	SFX 20:0.25
サイズ(パワーサプライ部)	203(W)×348(L)×242(H)mm
電源	100V 50/60Hz
周波数 / 出力	20kHz / 250W
処理容量	0.1~500mL
発振方式	連続発振 / パルス発振
振幅制御範囲	振幅10~100%
マイクロチップモード	振幅10~70%(最大振幅設定を70%に制限)
コントロールモード設定内容	時間、エネルギー、温度
プログラムメモリ	最大20個のプログラムを記憶
プログラム可能なパラメータ	連続発振 / パルス発振
	時間制御、エネルギー制御又は温度制御の選択
	パルスのON時間 / OFF時間 / エネルギー
	パルスの合計ON時間 / 合計エネルギー
	振幅設定(%)
セット内容	発振器 / コンバータ
	1/2"タップ型破碎ホーン
	温度センサープローブ

■ アクセサリー

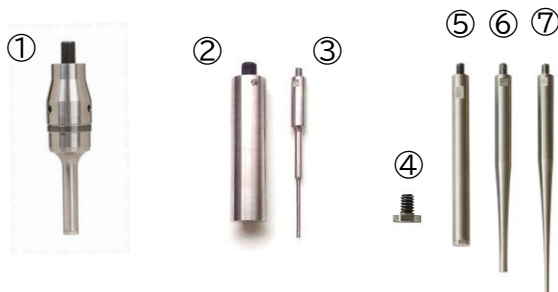

①1/2"タップ型破碎ホーン(型番:101-147-037)
 処理量:10~250mL 振幅:21~145 μ m
 サンプル容器:ビーカー、50mL遠沈管など

②スペシャル・マイクロチップ カプラー部(右図)
 (型番:J12114705775)
 ③スペシャル・マイクロチップ 先端部(左図)
 (型番:101-148-063)
 処理量:0.1~5mL 振幅:23~133 μ m
 サンプル容器:1.5mL, 15mL遠沈管・試験管

④1/2"フラットチップ(型番:101-148-013)
 1/2"タップ型破碎ホーンおよび①エクステンダー
 の標準品です。消耗時には交換が必要です。

⑤1/2"エクステンダー(型番:101-147-049)
 処理量:20~250mL 振幅:21~145 μ m
 サンプル容器:フラスコ各種

⑥1/4"マイクロチップ(型番:101-148-070)
 処理量:3~50mL 振幅:60~247 μ m
 サンプル容器:試験管・15mL, 50mL遠沈管・バイアル瓶

⑦1/8"マイクロチップ(型番:101-148-062)
 処理量:0.5~20mL 振幅:116~494 μ m
 サンプル容器:試験管・1.5mL, 15mL, 50mL遠沈管