



JOICO 顕微鏡発売から

100周年キャンペーン



色鮮やかさと明るさを実現
信頼の検査を支えます



Ni-L 明視野三眼鏡筒セット

キャンペーン
特別価格

650,000円^(税別)


2026.3.31 受注分まで

〈構成〉

- Ni-L 本体・三眼鏡筒・接眼レンズ・ステージ
- 2-100x ハネノケアクロコンデンサー
- 対物レンズ プランフルオール 4x
- ダストカバー
- C-0.55x DS リレーレンズ
- TV 直筒 0.55x



高演色LED光源

※演色性：自然光（太陽光）で見た場合とどれだけ近いかの度合い。
演色性が高いほど物体本来の色を忠実に再現できより鮮やかに見える。

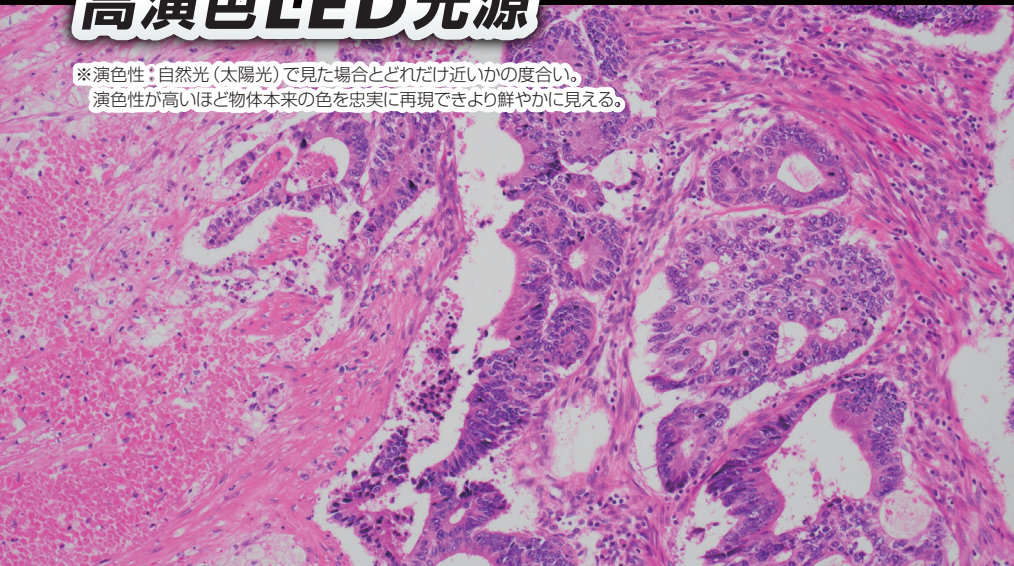

◀ 高演色 LED 光源

演色性が高いので、わずかな色合いの違いも鮮やかに表現することができます。ハロゲン光源より色温度が高く、より自然光に近い白い照明が得られます。

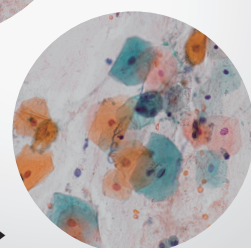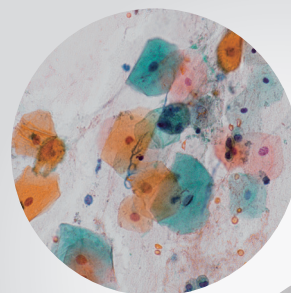


ハロゲン光源 ▶

高輝度LED光源



マルチティーチング顕微鏡

最大 10 人用まで対応しています。

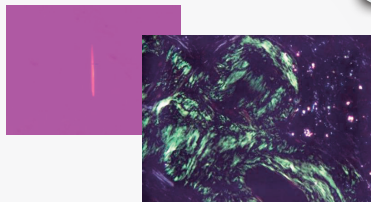

偏光観察

痛風検査やアミロイド観察に対応しています。



位相差・微分干涉観察


高倍率の位相差・微分干涉観察に対応し、血小板算定やトリコモナス原虫の観察にお使いいただけます。

ランプハウスの突出の無いコンパクト設計

Ni-L は透過用の LED 光源を本体に内蔵しており、ランプハウスの突出が無く、奥行きが短くコンパクトなため、設置スペースが節約できます。

高い剛性

振動に耐える十分な設置面積を有し、重量のある対物レンズやカメラ、マルチティーチング装置をお使いの場合にも安定した観察環境を得られる設計になっています。

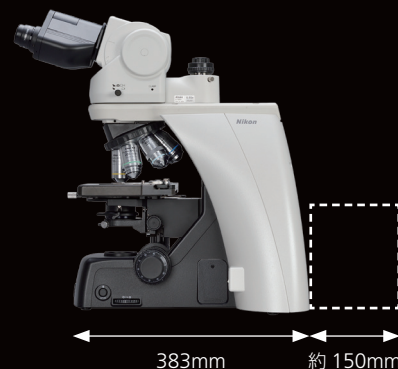

番号	セット名	構成	希望小売価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
1	Ni-L 明視野 エルゴ鏡筒セット	顕微鏡：Ni-L	935,500 円	700,000 円
		エルゴ鏡筒・接眼レンズ		
		ステージ・2-100x コンデンサー		
		対物レンズ プランフルオール 4x		
		ダストカバー		
		エルゴ DSC ポート C-0.55x		
2	Ni-L 明視野 三眼鏡筒セット	顕微鏡：Ni-L	875,400 円	650,000 円
		三眼鏡筒・接眼レンズ		
		ステージ・2-100x コンデンサー		
		対物レンズ プランフルオール 4x		
		ダストカバー		
		C-0.55x DS リレーレンズ		
		TV 直筒 0.55x		



株式会社 ニコン ソリューションズ

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/

本社 140-0015 東京都品川区西大井 1-7-11 ウエストサイト 3 階



お問い合わせ