

Visualix

# CREST Optics

## スピニングディスク共焦点ユニットキャンペーン



### ～全てのラボに共焦点顕微鏡を～

お持ちの顕微鏡やカメラ・光源に取り付けるだけで、ハイエンドスピニングディスク共焦点顕微鏡に!!高コストパフォーマンス・超高速・高解像度の共焦点顕微鏡ユニット新発売記念の大特価 **キャンペーン価格**にてご案内!!

# CICERO

**NEW**



2026年3月末受注分まで

~~850万円~~ ▶ **690万円**

各顕微鏡会社のソフトウェア制御可能。使い勝手を変えずハイスペック共焦点顕微鏡に拡張可能です。

(cellSens、NIS、LAS X、μManager、VisView等)

※実際のお持ちのソフトウェアでの制御は弊社営業までお問い合わせください。

● 使用するカメラや光源をお持ちでない場合は **下記推奨品を併せてキャンペーンでご提供!!**

### Teledyne社最先端イメージング用sCMOSカメラ **BSIExpress**

- 量子効率 95%
- 素子サイズ 6.5μm x 6.5μm
- 2048 x 2048 (4.2 M pixel)
- 読み出しノイズ 1.0e-
- 95フレーム/秒 USB 3.2 Gen2



従来のカメラを覆す高感度・高解像度・高速カメラ

2027年3月末受注分まで

~~330万円~~ ▶ **240万円**

### 89north社 ハイパワー4色レーザーセット **LDI-4 laser Diode Illuminator**

### Lumencor社 ハイパワー4色LEDセット **AURA Light Engine**



ハイパワー多色レーザー/LEDセット

2026年3月末受注分まで

LDI-4 ~~550万円~~ ▶ **440万円**

AURA ~~400万円~~ ▶ **330万円**

<https://visualix.jp/>




# CICERO

## YOUR CONFOCAL JOURNEY STARTS HERE




### あらゆる顕微鏡で広視野スピニングディスク共焦点イメージング

CICEROは、ワイドフィールド (WF) とスピニングディスク共焦点 (CF) を統合した包括的なソリューションを提供します。このソリューションにより、お手持ちの顕微鏡が、直感的かつ信頼性の高い共焦点システムへと進化します。ライフサイエンス、計測学、材料科学といった各分野で高まる、高解像度3Dイメージングへのニーズに確実に応えます。LEDまたはレーザー光源の採用により、エントリーレベルから高度なアプリケーションまで幅広く対応します。また、広いスペクトル範囲を持つため、多岐にわたる研究領域で、確かなパフォーマンスを発揮します。

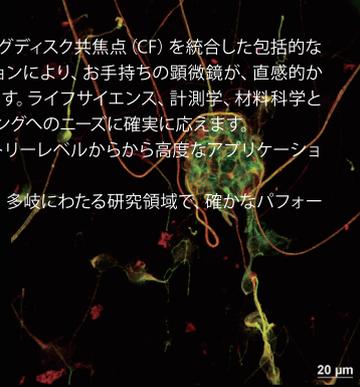


### 最大視野22mmの高速スピニングディスク共焦点イメージング

CICEROは、コンパクトな設計ながら、15,000 rpm (回転 / 分) の高速回転と高感度により、ハイスピードな画像取得を実現します。これにより、生細胞や組織の3Dイメージングを容易に行うことが可能です。また、広い視野を持つため、最小限のスキャンプロセスで大型サンプルを 1 フレームで捉えることができ、効率的な観察をサポートします。

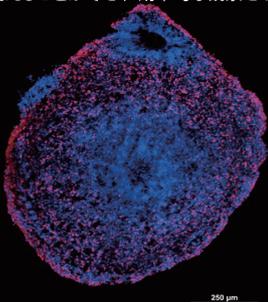

皮膚オルガノイド

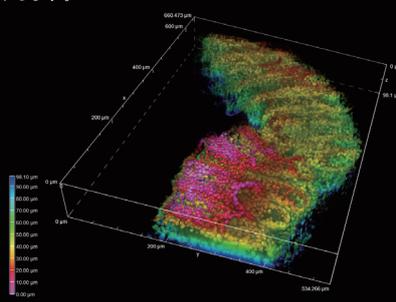

透明化されたマウスの脳組織切片

### コンパクトで柔軟なシステム

独自設計のCICEROは、Cマウントカメラポートを備えた正立型および倒立型顕微鏡に装着でき、最大限の構成柔軟性を提供します。主要な顕微鏡システムとの統合が可能で、快適なユーザーエクスペリエンスを実現します。これにより、どなたでも日常業務に広視野共焦点画像を容易に組み込むことが可能です。さらに、ディスクは密閉されたコンパートメントに収納されており、埃のないクリーンな環境を確保します。



#### ユニバーサルイルミネーター

LEDとレーザー対応  
プラグアンドプレイソリューション



#### 必須コントロールプレート

オン/オフ点灯ボタン  
手動バイパスモード  
密閉型ダストフリーディスク



#### 広い波長範囲

励起波長: 390~750 nm  
蛍光波長: 430~850 nm



#### 広い視野

視野角最大22mm  
Cマウントカメラ



\*仕様、外観は予告なく変更することがあります

# Visualix

株式会社 Visualix <https://visualix.jp/>

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目6-7 大栄ビル7F

info@visualix-jp.com