

長い間のご愛顧誠にありがとうございます。


フローサイトメーター CytoFLEX ファミリー

**25%
OFF**

2026 年
12 月 25 日 (金)
受注分まで



セルソーター
CytoFLEX SRT

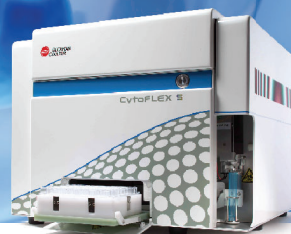

セルアナライザー
CytoFLEX S



セルアナライザー
CytoFLEX LX

キャンペーン番号

FLW2604

※ご注文の際は、こちらのキャンペーン番号を弊社販売代理店へお伝えください。

**CytoFLEX ファミリーなら、ソーターでもアナライザーでも
操作性がほぼ同じでストレスフリー**

キャンペーン対象製品



卓上型セルソーター CytoFLEX SRT

高感度な蛍光検出により目的細胞を確実に分取


最大 4 レーザー 15 カラー : 7 種類

例) 3 レーザー 12 カラー

メーカー希望小売価格

特別メーカー希望小売価格

約 3,925 万円 (税別) → 約 **2,944** 万円 (税別)

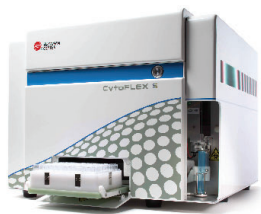

コンパクトフローサイトメーター

CytoFLEX / CytoFLEX S / CytoFLEX LX

研究の段階に合わせたシンデレラフィットの仕様

2 レーザー 4 カラー ~ 6 レーザー 21 カラー : 51 種類

例) 1 レーザー 4 カラー

メーカー希望小売価格

特別メーカー希望小売価格

約 656 万円 (税別) → 約 **492** 万円 (税別)

※特別メーカー希望小売価格の実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

**CytoFLEX
ファミリーの
特長**

- ✓ **高い感度** - 微弱な蛍光サンプルやナノ粒子の検出が可能
- ✓ **操作性** - 全製品共通の簡便なソフトウェアで、1つ覚えるだけでOK
- ✓ **柔軟性** - レーザーや検出器をアクティベートするだけの簡単アップグレード
さらにS (V-B-Y-R) とLXはスペクトル検出器も搭載可能

CytoFLEXファミリーは日本で800以上のラボで使用されています

キャンペーン対象機種例

※その他の仕様は弊社までお問合せください

製品番号	製品	メーカー希望小売価格 (税別)	特別メーカー希望小売価格 (税別)
コンパクトフローサイトメーター CytoFLEX/CytoFLEX S/ CytoFLEX LX			
B53000	CytoFLEX System V5-B5-R3 (3レーザー13カラー)	¥21,834,000	¥16,375,500
B53019	CytoFLEX System V0-B4-R0 (1レーザー4カラー)	¥6,562,000	¥4,921,500
B75408	CytoFLEX S System V4-B2-Y4-R3 (4レーザー13カラー)	¥23,306,000	¥17,479,500
B75811	CytoFLEX S System V0-B2-Y4-R3 (3レーザー9カラー)	¥14,219,000	¥10,664,250
B75812	CytoFLEX S System V0-B2-Y4-R0 (2レーザー6カラー)	¥9,956,000	¥7,467,000
C11186	CytoFLEX LX UV3-V5-B3-Y5-R3-IR2 (6レーザー21カラー)	¥51,766,000	¥38,824,500
C23009	CytoFLEX LX NUV0-V5-B3-Y5-R3-IO (4レーザー16カラー)	¥34,582,000	¥25,936,500
C16574	CytoFLEX Plate Loader DW	¥3,040,000	¥2,280,000
卓上型セルソーター CytoFLEX SRT			
C71883	CytoFLEX SRT V5-B2-Y5-R3 (4レーザー15カラー)	¥44,895,000	¥33,671,250
C71884	CytoFLEX SRT V5-B2-Y5-R0 (3レーザー12カラー)	¥39,256,000	¥29,442,000
C71888	CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R0 (2レーザー7カラー)	¥29,098,000	¥21,823,500

※レーザー名略称：UV:紫外線, NUV:近紫外線, V:紫, B:青, Y:黄緑, R:赤, IR:赤外線

セルソーターの選ぶポイント

セルソーターは3レーザーくらいがちょうどいい!

■ コンペンセーションを最小限にできる

1レーザーで励起する蛍光色素が増えるほど、蛍光の重なりが多くなり、色素の選択やコンペンセーションが煩雑になります。3レーザー構成なら、1レーザーあたり1～2つの蛍光色素を割り当てれば、コンペンセーションも最低限になり、簡単なパネル設計で細胞分取ができます。

■ ゲーティングストラテジーに有利


3レーザーあることで簡単に3～6カラーのパネルを組むことができるため、経験や熟練度が浅くても着実なゲーティングストラテジーを組めます。

■ 目的の細胞を確実に分取できる

蛍光色素の選択の幅が広がることで、死細胞除去や他の細胞のコンタミを防ぐことができるようになるため、純度高く、目的の細胞を分取することができます。


蛍光の検出感度はしっかりと検討する

目的細胞をコンタミを最小限に抑えるように蛍光色素を選択しますが、弱陽性と強陽性細胞を分離する場合には、検出器の感度も重要となります。感度の低い検出器では、それらが十分に分離できずに、コンタミの原因となることがあります。

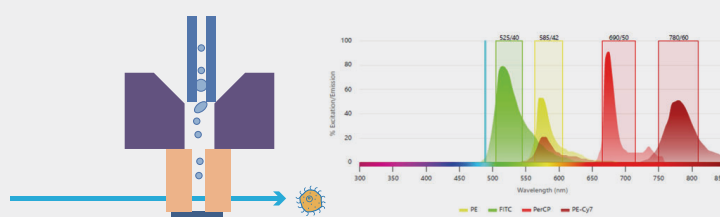

1レーザー 4カラーの例

蛍光の漏れ込みが多くコンペンセーションが複雑になる。

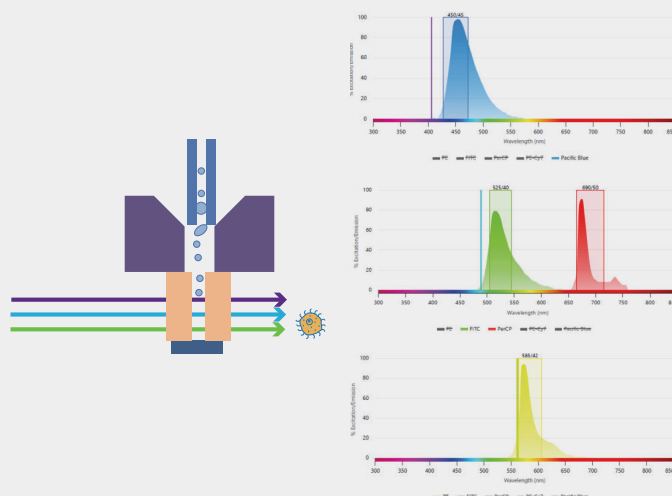

3レーザー 4カラーの例

蛍光の漏れ込みが少ない蛍光色素を割り当てることでコンペンセーションがシンプルに。



**卓上型セルソーター CytoFLEX SRT は
上記のポイントを押さえた普段使いに
最適な1台です!**



注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。



ベックマン・コールター ライフサイエンス

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 TEL : 03-6745-4704

✉ bckk_ls_web@beckman.com URL : <https://www.beckman.jp>



ベックマン・コールター ライフサイエンスは Danaher の一員です。