



ウサギ抗リン酸化抗体作製 キャンペーン!

対象期間
2024

7/8 月 ▶ 9/20 金

- 安心・信頼の国内免疫
抗原感作、ELISA を含む
- 力価保証で承ります^{注1}

リン酸化抗体



2羽

350,000 円 (税別)

※ 1羽 20mL のリン酸 affinity 精製、非リン酸抗体吸収を含みます。 ※他、修飾部位特異抗体も承ります。

リン酸化抗体のお届けは【ご依頼後約 130 日】となります。

納品スケジュールのご案内 (一例)

8 月末のお申込み：納品は 1 月中旬～ 2 月初旬頃の見込み

9 月 20 日のお申込み：納品は 2 月初旬～ 2 月中旬頃の見込み


作業内容は裏面をチェック▶

作業の流れ（リン酸化抗体の場合）

1 配列設計

配列設計

ご希望に応じて、アクセッション番号及び、リン酸化ご希望部位をお伺いの上、配列設計・ご提案申し上げます。

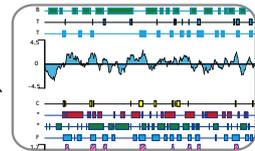

2 合成・結合

リン酸及び、非リン酸ペプチド合成 純度 > 80%、キャリアタンパク質結合

3 抗血清作製

ウサギ抗血清作製（42日免疫）

	Day0	Day7	Day14	Day21	Day28	Day35	Day42
感作	○	○	○	○	○	○	
ELISA					○	○	
採血	○				△		○

△ Day28 試採血は、免疫中に送付可能です（オプション¥5,000（税別） / 2羽にて承ります）。

4 精製

リン酸化ペプチド アフィニティー精製

ウサギ2羽中、1羽20mLを用いた精製。カラム結合分画を溶出。

5 吸収

非リン酸抗体吸収

④の溶出分画を、非リン酸ペプチドカラムに通し、非リン酸化抗体を吸収。素通り分画を回収。

▶ 納期：ご依頼後約 130 日

注1) 抗体価保証につきまして

- *ウサギ免疫中の試採血を用いたELISA測定において、希釈倍率4000倍時のOD値が0.5を超えない際は費用は頂きません。
- *弊社にて設計致しました配列に限らせて頂きます。
- *他、保証外事項となります際は事前にご案内、相談申し上げます。

他、各種プランもごございます。

ペプチド抗体作製 ポリクロナール抗体作製（預かり抗原）

For custom peptide antibody, English communication is available from us!

Please feel free to contact us at custom@scrum-net.co.jp



お気軽にお問い合わせください
custom@scrum-net.co.jp

もっと知りたい方は



スクラム 受託

で検索

代理店



株式会社 スクラム

本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6250 Fax. (03)-6458-6251
西日本営業所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
E-mail : custom@scrum-net.co.jp
Web Site : www.scrum-net.co.jp

CL20240612A